

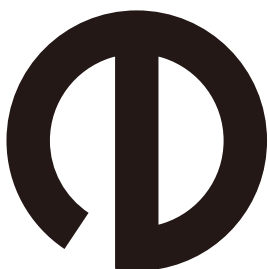


Oclean
Product User Manual

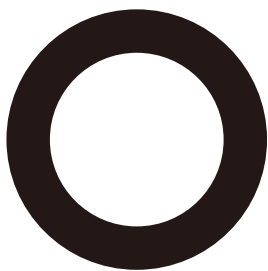

Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

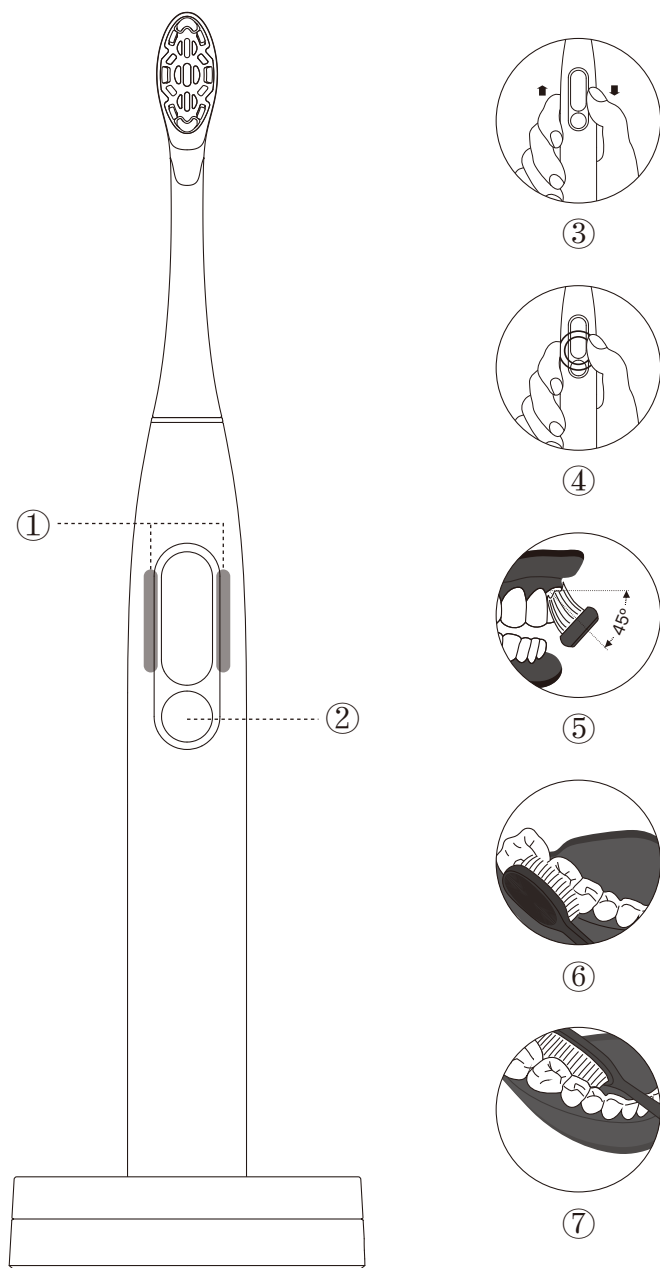

You can read the component description
corresponding to each label in detail.

Děkujeme, že používáte elektrický zubní kartáček Oclean

Důležité bezpečnostní tipy

1. Děti ve věku 8 let a starší a osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou jeho nebezpečí. Dětem není dovoleno hrát si s tímto spotřebičem. Dětem není dovoleno provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
2. Tento produkt může používat pouze speciální kartáčkové hlavice Oclean a neneseme odpovědnost za žádné následky způsobené necertifikovanými kartáčkovými hlavici třetích stran.
3. Tento produkt je pouze osobní čistící prostředek a nedoporučuje se pro lékařské použití.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Neumísťujte jej na místo vystavené přímému slunečnímu záření. Doporučuje se jej umístit na suché a větrané místo při pokojové teplotě.
5. Před nabíjením udržte telefon v suchu, oťete jej do sucha měkkým hadříkem a pravidelně čistěte nabíjecí rozhraní suchým hadříkem, abyste zabránili usazování skvrn.
6. Spotřebič lze napájet pouze bezpečnostním malým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
7. Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám. Normální teplotní rozsah pro nabíjení baterie je 0-45 stupňů.
8. Vezměte prosím na vědomí, že svorky bateriové napájeného zařízení nebo baterii by se neměly dotýkat kovových předmětů, aby se zabránilo riziku zkratů.

Návod k použití

První spuštění

První použití: Klepnutím na tlačítko napájení zapnete zubní kartáček a kartáček poté zůstane v pohotovostním režimu. Když je obrazovka zapnutá, Bluetooth a WiFi zůstanou zapnuté i po vypnutí obrazovky, Bluetooth a WiFi se vypnou po 30 sekundách nečinnosti;



Google Play Store & iOS APP Store

Nainstalujte APP: Po naskenování QR kódu pro stažení app „Oclean Care+“ vyhledejte a připojte zubní kartáček v APP Poznámka: Připojení v „Nastavení systému-Nastavení Bluetooth“ mobilního telefonu je neplatné.

Připojení APP (domovská stránka-Přidat zařízení-Vybrat WiFi-Zadat heslo-Připojení-Připojení úspěšné)

Zobrazení záznamů čištění v aplikaci APP

Teprve poté, co je zubní kartáček navázán na APP a připojen k WiFi, může APP získat údaje o čištění během čištění. Data kartáčování kratší než 15 sekund nebudou uložena. Samotný zubní kartáček má omezenou úložnou kapacitu a může uložit maximálně 7 dní údajů o čištění. Připojte se k WiFi a synchronizujte data s aplikací do 7 dnů.

Nabíjení zubního kartáčku: Po zapnutí nabíjecí základny vysušte spodní část zubního kartáčku a vložte kartáček do nabíjecí základny, aby se nabíl. Stav baterie můžete posoudit podle poměru baterie zobrazeného na displeji zubního kartáčku. Po úplném nabití kartáček včas vyjměte z nabíjecí základny. Po vyčištění zubů nabíje, když vám kartáček připomene, že je baterie vybitá.

Připomenutí přetlaku: Při čištění, pokud je vyvíjen příliš velký tlak, může dojít k poškození dásní nebo povrchu zubů. Proto, když kartáček detekuje nadměrný tlak, zazní upozornění a kontrolka ve spodní části bude svítit také červeně. (Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena)

Připomenutí nadměrného horizontálního tahu: Pokud je horizontální tah příliš velký, může během čištění snadno způsobit krvácení dásní nebo poškození zubního krčku. Proto, když kartáček při čištění zjistí, že horizontální tah je příliš velký/příliš rychlý zazní varování. (Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena)

Hlava kartáčku je nakloněna o 45°: Úhel 45° je zarovnan s gingiválním žlábkem, což může lépe čistit plak připojený k gingiválnímu žlábků a udržovat dásně zdravé Když začne čištění, zubní kartáček vydá zvuk, který to připomene hlavu kartáčku lze naklonit o 45°. (Tato funkce musí být zapnuta v APP)

Připomenutí změny oblasti: Chcete-li účinně předcházet zubním problémům, musíte před čištěním zubů vyčistit všechny oblasti. Proto se během procesu čištění po vyčištění oblasti zobrazí zvukové upozornění na změnu oblasti. (Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze ji zapnout v APP)

Automatické probuzení:

Ve výchozím nastavení zvednutí zubního kartáčku automaticky probudí obrazovku.

Pokud se obrazovka automaticky probudí několikrát za sebou bez čištění kartáčem, budete ji muset při příštím použití probudit kliknutím na tlačítko.

Zvednutí zubního kartáčku, když je baterie vybitá, automaticky neprobudí obrazovku.

① Dotykový displej

Podporuje operace posouvání nahoru a dolů. Při posouvání se prosím dotkněte okrajů obrazovky konečky prstů, abyste provedli operaci posouvání.

② Tlačítko zapnutí/vypnutí

Poté, co se zubní kartáček probudí, krátkým stisknutím tlačítka napájení, když je v provozu, se operace přeruší; pokud nedojde k žádné operaci po dobu delší než 30 sekund, obrazovka se přepne do černého režimu; Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 sekund obnovíte tovární režim.

③ Přejedte po obrazovce nahoru a dolů

④ Stiskněte tlačítko napájení pro potvrzení nastavení/zahájení čištění

Výzva vybitá baterie."

Když je výkon zubního kartáčku nižší než 10 %, na displeji se často zobrazí upozornění na vybití baterie a je třeba ji nabít. Když je baterie vážně vybitá, telefon nelze zapnout a motor bude vibrovat jako připomínka.

Důležité upozornění na nabíjení

Tento elektrický zubní kartáček je dodáván s mechanismem bezdrátového rychlého nabíjení Doporučuje se, aby byl kartáček připojen a nabíjen pouze tehdy, když je třeba kartáček nabít. Nepokládejte kartáček na nabíječku, když není potřeba pro nabíjení a po jeho plném nabití nabíjení na plný výkon po dlouhou dobu způsobí předčasné selhání interní baterie a ovlivní to používání.

Doporučená metoda kartáčování

- ⑤ Zubním kartáčkem pomalu pohybujte se štetinami o 45° k linii dásní. Během tohoto procesu není nutné ručně kartáčovat nahoru a dolů.
- ⑥ Držte rukojeť zubního kartáčku zlehka a pomalu s ní krouživými pohyby netlačte.
- ⑦ Po čištění si prosím vypláchněte ústa vodou.



1. Je zakázáno rozebírat, narážet, mačkat nebo házet do ohně.
2. Pokud se produkt zdá být silně vyboulený, dále jej prosím nepoužívejte.
3. Nevystavujte elektrické spotřebiče ani baterie nadměrným teplotám.
4. Je zakázáno používat baterii po namočení ve vodě.
5. Buďte si vědomi nebezpečí zkratu svorek bateriových spotřebičů nebo baterii kovovými předměty.

Před likvidací produktu je třeba z produktu vyjmout baterii podle následujících kroků:

1. Otevřete spodní kryt a vyjměte uzavírací šroub.
2. Pomocí šroubováku odšroubujte spodní šroub a otevřete spodní kryt.
3. Šroubovákem otevřete přezky na obou stranách, vyjměte strojek, nůžkami odstříhnete niklové kolíky baterie z B+ a B- a vyjměte baterii.

- Před likvidací spotřebiče je nutné vyjmout baterie;
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič vypnutý;
- Baterie by měly být zlikvidovány bezpečným způsobem.

Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Když baterie dosáhne konce životnosti nebo vyteče, zařízení a baterie musí být řádně zlikvidovány.

● specifikace produktu

Název produktu	Oclean WiFi Smart Sonic elektrický zubní kartáček
Model produktu	V8100
Jmenovitý vstup	5V ---1A*
Jmenovitý příkon	5W
Kapacita baterie	1200 mAh
Kompatibilní zařízení	Kompatibilní se systémem Android 5.0, iOS9.0 a vyšším, podporuje Bluetooth 4.2
Frekvenční rozsah	WiFi: 2412 MHz-2472MHz BT: 2402MHz-2480MHz
Vodotěsnost	IPX7
Způsob nabíjení	základna bezdrátového nabíjení

*Při nabíjení je nutné k nabíjení použít adaptér s výstupem 5V---1A (maximální výkon výstupu je menší než 15W) a v souladu s požadavky IEC 60335-1

Výrobce: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: 28G, budova 3, Dachong Business Center (fáze 3), č. 18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	---	---	---	---	5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.