


Product
User Manual



Oclean Sonic Electric Toothbrush

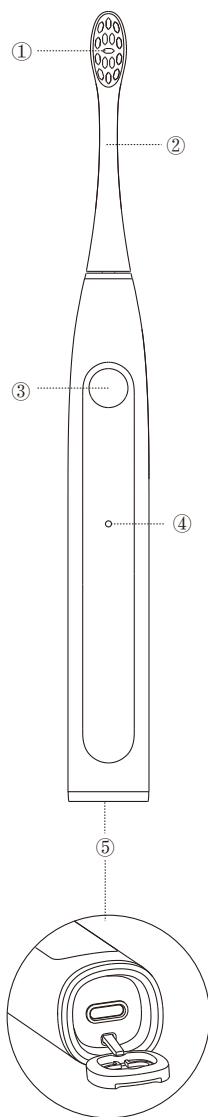

You can read the component description corresponding to each label in detail.

Děkujeme, že používáte elektrický zubní kartáček Oclean

Důležité bezpečnostní tipy

1. Děti ve věku 8 let a starší a osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí jeho nebezpečí. Dětem není dovoleno hrát si s tímto spotřebičem. Dětem není dovoleno provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
2. Tento produkt může používat pouze speciální kartáčkové hlavice Oclean a neneseme odpovědnost za žádné následky způsobené necertifikovanými kartáčkovými hlavicemi třetích stran.
3. Tento produkt je pouze osobní čistící prostředek a nedoporučuje se pro lékařské použití.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Neumísťujte jej na místo vystavené přímému slunečnímu záření. Doporučuje se jej umístit na suché a větrané místo při pokojové teplotě.
5. Před nabíjením udržujte telefon v suchu, otřete jej do sucha měkkým hadříkem a pravidelně čistěte nabíjecí rozhraní suchým hadříkem, abyste zabránili usazování skvrn.
6. Spotřebič lze napájet pouze bezpečnostním malým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
7. Nevystavujte zařízení ani baterii příliš vysokým teplotám. Normální teplotní rozsah pro nabíjení baterie je 0-45 stupňů.
8. Vezměte prosím na vědomí, že svorky bateriové napájeného zařízení nebo baterií by se neměly dotýkat kovových předmětů, aby se zabránilo riziku zkratu.

Kartáčková hlavice: Při výměně hlavice kartáčku ji vytáhněte nebo vložte svisle a neotáčejte ji doleva ani doprava.

Zubaři doporučují vyměnit hlavice kartáčku každé 2 až 3 měsíce.

Lidé s orální citlivostí by měli věnovat pozornost následujícím situacím:

Lidé, kteří právě prodělali operaci parodontu v ústní dutině nebo podstupují léčbu.

Lidé s jinými příznaky v ústech, včetně slabé zubní protézy nebo přetrvávajícího silného krvácení z dásní.

Ostatní lidé s citlivými nebo křehkými ústy atd.

Nedoporučuje se používat tento výrobek nebo se před použitím poradit s profesionálním zubním lékařem.

Tento produkt není vhodný pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné osoby nebo osoby, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti [včetně dětí (0-12 let)]. Pokud není používán pod dohledem a vedením jeho opatrovníka.

Detailní představení dílů stroje

- ① Štětiny ② Hlava kartáčku

③ Tlačítko přepínače/režimů, die Verwendung erfolgt unter Aufsicht und Anleitung des Erziehungsberechtigten. Když se obrazovka zubního kartáčku rozsvítí, kliknutím na tlačítko vyberte režim čištění a dalším kliknutím do 3 sekund režim čištění přepněte.

- ④ Kontrolka:

Když se probouzí a stav baterie je ≥10 %, bílé světlo vždy svítí;

Při probuzení a nabití baterie <10%, dýchání červeného světla;

Během nabíjení bílé světlo dále dýchá;

Plně nabitě, bílé světlo stále svítí.

- ⑤ Nabíjecí port typu C

Uživatelské příručky

1. První zapnutí - vyberte jazyk: Klikněte na tlačítko pro výběr jazyka zubního kartáčku, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro nastavení jazyka jako jazyka zubního kartáčku.

2. Výběr režimu: Klepnutím na tlačítko vyberte režim čištění. Opětovným kliknutím na tlačítko do 3 sekund přepnete režim čištění. Ve zvoleném režimu čištění bude fungovat normálně po 3 sekundách. Ve stavu kartáčování stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro přepínání mezi režimy.

"Péče o dásně" - speciálně navrženo pro lidi s citlivými zuby, jemně čistí a zároveň snižuje podráždění citlivých oblastí.

"Denní úklid" - Vhodné pro každodenní základní čištění úst, účinně odstraňuje zbytky jídla a nečistoty.

"Hlubkové čištění" - Dostane se hluboko mezi zuby a těžko dostupná místa, aby účinně odstranil odolné skvrny a bakterie.

"Bělení" - Díky účinnému čištění je povrch zubů hladší a bělejší.

"Uklídnutí masáž" - účinně masíruje dásně během čištění zubů.

Proto si můžete vybrat různé modely na základě vašich preferencí a doporučení vašeho zubního lékaře.

3. Obnovení továrního nastavení: Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 8 sekund obnovíte tovární nastavení zubního kartáčku.

Zdravé kartáčování

- Pomalu pohybuje zubním kartáčkem se štětinami pod úhlem 45 stupňů k linii dásní;
- Během čištění se vibrační efekt zubního kartáčku nakrátko zastaví každých 30 sekund, což indikuje nutnost změnit polohu čištění;
- Pokud během používání nedojde k žádné aktivní pauze, po ukončení režimu čištění se automaticky vypne.

Způsob nabíjení:

Před nabíjením vysušte spodní část zubního kartáčku a nabíjte jej směrem k portu typu C na spodní straně zařízení. Když bílé světlo dýchá, znamená to, že se nabíjí, když bílé světlo svítí, znamená to, že je baterie plně nabitá. Plné nabití trvá obvykle 3 hodiny.

Výzva k vybití baterie: Když je výkon zubního kartáčku nižší než 10 %, červené světlo vám připomene, že je potřeba jej nabít.



- 1. Je zakázáno rozebírat, narážet, mačkat nebo házet do ohně.
- 2. Pokud se produkt zdá být silně vyboulený, dále jej prosím nepoužívejte.
- 3. Nevystavujte elektrické spotřebiče ani baterie nadměrným teplotám.
- 4. Je zakázáno používat baterii po namočení ve vodě.
- 5. Buďte si vědomi nebezpečí zkratu svorek nebo baterií bateriových spotřebičů kovovými předměty.

● **Specifikace produktu**

Název produktu	Sonický elektrický zubní kartáček Oclean X Lite		
Model produktu	NI801	Jmenovitý vstup	5V $\pm$ 0,5A*
Jmenovitý příkon	2,5W	Kapacita baterie	1100mAh
Vodotěsná třída	IPX7	Způsob nabíjení	Typ-C

*Při nabíjení je nutné k nabíjení použít adaptér s výstupem 5V $\pm$ 0.5A (maximální výkon výstupu je menší než 15W) a v souladu s požadavky IEC 60335-1

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	--	--	--	--	5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- ✕ This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.